

People have Priority



Sterilizálás, higiénia és ápolás



Sterilizálás, higiénia és ápolás

Higiénia a legmagasabb szinten

Élenjáró sterilizálás, higiénia és ápolás a fogászati praxisban! A W&H teljes körű megoldást kínál az Ön kézi- és könyökdarabjainak, illetve turbináinak higiéniai körforgásához.



A kézidarabok és motorok előkészítésének pontos munkafolyamatát lásd a wh.com weboldalon.

A vállalat	4 – 5
1. sz. termékáttekintés: Assistina 3x3, Assistina 301 plus, Assistina 3x3 és Lisa gyorsciklus	6 – 7
2. sz. termékáttekintés: Lisa, Lina, Multidem	8 – 9
Assistina 3x3 / 3x2	10 – 11
Assistina 301 plus	12 – 13
Assistina 3x3 és Lisa gyorsciklus	14 – 15
Lisa	16 – 17
Lina	18 – 19
Visszakövethetőség	20 – 21
Lisa és Lina tartozékok	22 – 23
Seal ²	24 – 25
Multidem	26 – 27
Osmo, Dist, Prim	28 – 29
RDG-adapterkészlet	30
Műszaki adatok	31 – 33
Adapter rendszeráttekintés	34 – 35



W&H Dentalwerk
Bürmoos (A)



W&H Sterilization
Brusaporto (I)

Középpontban az ember.

Az egészséges fejlődés alapja az előrettekintő hozzáállás. Ez éppúgy érvényes a sterilizálásra, higiénia és ápolásra, mint a W&H vállalatra: hiszen családi vállalkozásként generációk óta a megfelelő előrelátással tevékenykedünk.

Sikerünk titka: a W&H kezdettől fogva az embert állítja a középpontba – legyen szó akár üzleti partnerről, akár ügyfélről, páciensről vagy munkatársról. Joggal adódna a kritikus kérdés: ez tényleg így történik a gyakorlatban? A válaszunk: tegyen próbára minket!



People have Priority

a W&H gyors áttekintése

- > az ausztriai központ
- > világszerte 1000 munkatárs
- > 80 munkacsoport
- > 1890-ben alapította Berlinben
Jean Weber és Hugo Hampel
- > 3 gyártóbázis
- > 19 leányvállalat
Európában és Ázsiában
- > 95% feletti exporthányad

További információk:
wh.com

PEOPLE HAVE PRIORITY



Bármikor is érje Önt,

a W&H higiéniai és ápolási programjával
mindenre fel van készülve.

Vegye fel a kapcsolatot most az Ön fogászattermék-forgalmazójával, vagy látogasson el a wh.com weboldalra.



»Az automatikus külső tisztítással az Assistina 3x3 az első számú választás a turbinák, kézi- és könyökdarabok sterilizálásra való előkészítéséhez.«

Dr. Klaus Kohlpaintner,
fogorvos

Az előnyök áttekintése

- > Automatikus belső tisztítás (hajtómű-alkatrészek és spraycsatornák)
- > Automatikus külső tisztítás (Assistina 3x3)
- > Eszközök tökéletes olajozása
- > Rövid, mintegy hat perces ciklusidő
- > Egyszerű kezelés
- > Optimális ár/teljesítmény arány
- > Hitelesített eljárás

Assistina 3x3 / 3x2



Bővebb információ
lásd 11. oldal



»Assistina 301 plus – rendkívül megbízható segítség a munkatársaimnak az eszközeim olajozásához hosszú évek óta.«

Dr. Florian Gierl,
fogorvos

Előnyök áttekintése

- > Automatikus rotációs kenés
- > Automatikus olajadagolás
- > Eszközök optimális olajozása
- > Spraycsatornák tisztítása tisztító oldattal
- > Átfűvátás és szárítás sűrített levegővel

Assistina 301 plus



Bővebb információ
lásd 13. oldal



»Az Assistina 3x3 és a Lisa számomra az ideális kombinációt nyújtja az eszközök gyors előkészítéséhez.«

Dr. Regina Becker,
fogorvos.

Előnyök áttekintése

- > Rövidebb előkészítési idő az eszközökhöz
- > 6 perc az Assistina 3x3 esetében
- > 14 perc a Lisa gyorsciklusa esetében
- > 20 perc elteltével: megtisztított, ápolat és sterilizált eszközök

Assistina 3x3 és Lisa gyorsciklus

Bővebb információ
lásd 15. oldal



»Most már két Lisa sterilizátorom van, mert a készülékek olyan halkan működnek, és legfőképpen azért, mert meggyőzőek.«

ZA Jörg Pinder,
fogorvos

Előnyök áttekintése

- > Testreszabott automatikus ciklusok
- > Integrált és automatikus visszakövethetőségi koncepció
- > Integrált memóriakártya
- > Szabadalmaztatott vízelválasztó- és szűrőrendszer
- > Beépített porszűrő a belső alkatrészek megóvására
- > Programozható bekapcsolási idők
- > Vízhőmérséklet-érzékelő
- > Csomagolás nélküli eszközök sterilizálása mindössze 14 perc alatt a Lisa gyorsciklusa segítségével



Lisa

Bővebb információ
lásd 17. oldal



»A Lina számunkra az ideális alapmodell az eszközök költséghatékony előkészítéséhez.«

Dr. Jakob Svoboda,
fogorvos

Előnyök áttekintése

- > Az ECO B ciklus segítségével felére csökkenthető a ciklusidő
- > Alacsony zajszintű működés a szabadalmaztatott vízelválasztó-rendszernek köszönhetően
- > Felhasználóbarát gombsor az összes sterilizálási opció egyszerű kezeléséhez
- > Beépített porszűrő a belső alkatrészek megóvására
- > Programozható bekapcsolási idők
- > Kiváló ár/teljesítmény arány



Lina

Bővebb információ
lásd 19. oldal



»Szűrőcsere eláztatás, szerelő és tartálycipelés nélkül«

Dr. Maria Boshamer,
állatorvos

Előnyök áttekintése

- > Gyors és egyszerű patroncsere szerszám nélkül
- > A patron rögzítés nélkül behelyezhető
- > Alkalmazható hagyományos sterilizátorokhoz és előkészítő berendezésekhez
- > Rugalmas alkalmazás a szórópisztolynak köszönhetően
- > Nincs szükség elektromos csatlakozásra
- > Optimalizált ioncserélő gyanta
- > A tisztított víz megfelel a gőzsterilizátorok üzemeltetésére és az eszközök előkészítésére vonatkozó ajánlásoknak és előírásoknak



Multidem

Bővebb információ
lásd 27. oldal

Assistina 3x3 / 3x2



Tökéletes tisztítás mind kívül, mind belül

Belül is tiszta, kívül is tiszta. Hogy Ön azonnal arra koncentrálhasson, ami igazán fontos: a pácienseire. Mert az Assistina 3x3 automatikusan átveszi Öntől többek között a kézi- és a könyökdarabok időigényes előkészítését a sterilizáláshoz.



Belső tisztítás

A összes hajtómű-alkatrész és spraycsatorna alapos tisztítása elősegíti az eszközök tökéletes működését.



Külső tisztítás [Assistina 3x3]

A szerves lerakódások sterilizálás előtti eltávolítása a páciensek és a rendelői munkatársak biztonságát szolgálja.



Tökéletes olajozás

A hajtómű-alkatrészek precíz, automatikus olajozása meghosszabbítja eszközeinek élettartamát.



Rekordidő

A rövid, mintegy hat perces ciklusidő csökkenti az eszközök szokásos előkészítésének teljes időtartamát.



Egyszerű kezelés

Az Assistina működése magától értetődő, az előkészítés gombnyomásra történik. Egyáltalán nem igényel betanítást.



Ár/teljesítmény arány

Kiemelkedően magas hatásfokú tisztítás alacsony beszerzési költségek és különösen takarékos fogyasztás mellett.

Assistina 3x2
3 eszköz x 2 előkészítési lépés:
Belső tisztítás, olajozás

Assistina 3x3
3 eszköz x 3 előkészítési lépés:
Belső tisztítás, külső tisztítás, olajozás

Assistina 301 plus



Ápolás gombnyomásra

Egyszerű, kényelmes, biztonságos. Az Assistina 301 plus készülékben automatikusan megy végbe az ápolási folyamat: rotációs kenés, spraycsatornák belső tisztítása, átfúvatás sűrített levegővel. Mindössze 35 másodperc: eszköze tökéletesen ápol. Ezáltal jelentős mértékben nő az eszközök élettartama.



Automatikus rotációs kenés
Az olaj optimálisan eloszlik, és egyenletes kenőfilm alakul ki. A szennyeződések feloldódnak és eltávolítódnak.



Automatikus olajadagolás
Csak annyi olajat használ, amennyire az eszközök optimális kenéséhez szükség van. Sem többet, sem kevesebbet.



Áram nélküli működtetés
Az Assistina 301 plus áram nélkül működik. A működtetéshez csak sűrített levegő-csatlakozásra van szükség.



Optimális tisztítás
Az Assistina 301 plus megtisztítja és átöblíti a folyadék- és levegőcsatornákat tisztító oldattal, és kiszáritja ezeket sűrített levegővel.



Optimális olajozás
A belső alkatrészek tisztítása és kenése W&H Service Oil F1 használatával meghosszabbítja az eszközök élettartamát.



A tökéletes olajozás érdekében
W&H Service Oil F1, MD-400, az olajozó spray, a W&H kutatásaiból származó termék.

Assistina 3x3 és Lisa gyorsciklus



Sterilizálás rekordidő alatt

Megtisztítva, ápolva, sterilizálva. Az Assistina 3x3 tisztítási eljárása a Lisa gyorsciklussal kombinálva lerövidíti a teljes előkészítési időt. Mindössze 20 perc elteltével újra rendelkezésre állnak az eszközök.



Letörléses fertőtlenítés

A tisztítás és az ápolás előtt szükség esetén letörléses fertőtlenítést kell végezni.

Tisztítás és ápolás

Az Assistina 3x3 készülék képes három eszközt mindössze 6 perc alatt belül és kívül megtisztítani és ápolni.

Sterilizálás

A Lisa gyorsciklus segítségével az eszközök mindössze 14 perc elteltével kivethetők a sterilizátorból használatra kész állapotban.



Assistina 3x3 / 3x2

A tisztítási eljárás hitelesítését tanúsítvány igazolja, amely megtekinthető a wh.com oldalon.



Assistina 3x2


Az Assistina 3x2 esetében az eszközök előkészítése két lépésben történik: belső tisztítás, olajozás.

Lisa




Pontosság és tökéletesség

Rugalmas, hatékony, gyors. A B osztályú automatikus ciklusokkal és az integrált visszakövethetőségi koncepcióval a W&H Lisa sterilizátor új mércét állít fel a modern fogászatban.

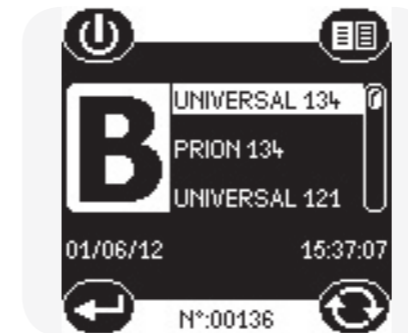


B osztályú ciklusok

A B osztályú automatikus ciklusokkal a Lisa mindenfajta rakományhoz biztonságos sterilizálást nyújt.

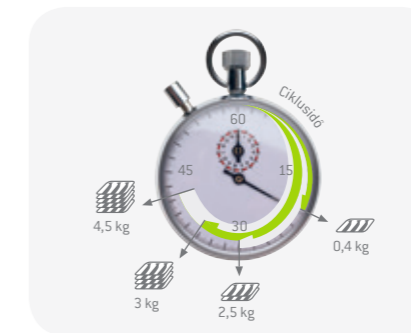

Adaptív ciklusidők

A ciklusok időtartamának a rakomány mennyiségéhez igazítása időmegtakarításhoz és az eszközök élettartamának növekedéséhez vezet.

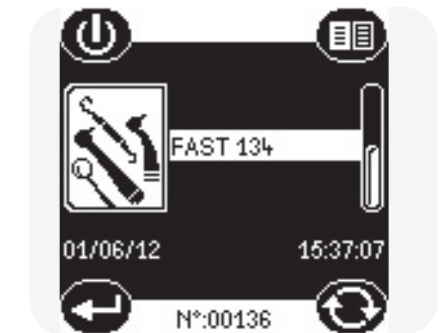

Gyorsciklus

A B osztályú ciklusok mellett a Lisa rendelkezik egy 14 perces gyorsciklussal is.



Egyszerű kezelés

A Lisa érintőképernyője a magától értetődő menürendszerrel számos alkalmazási lehetőséget kínál.



Hiánytalan dokumentálás

Az integrált automatikus visszakövethetőség az érintőképernyő segítségével azt jelenti, hogy több ideje marad a pácienseire.



Integrált memóriakártya

A memóriakártya és az USB-olvasó biztosítja a sterilizálási és tesztciklusok dokumentálását. Ehhez nincs szükség külön szoftverre a számítógépen.

Lina



A sterilizálás lényege

Egyszerű és bővíthető. A Lina kiegészíti a W&H sterilizátorok választékát, és a B osztályú ciklusokkal maximális biztonságot és kiváló ár/teljesítmény arányt nyújt Önnek.



Kizárólag B osztályú ciklusok
A Lina sterilizátor kizárólag B osztályú ciklusokkal, valamint kisebb rakományok esetén rövid ECO B ciklusokkal működik.



Egyszerű navigálás
A könnyen kezelhető gombsor garantálja az egyszerű navigálást az összes sterilizálási opció között.



ECO B sterilizáló program
Kis rakományok és csomagolás nélküli eszközök esetén a felére csökkenthető a ciklusidő.



Multiporttal bővíthető
A Multiport lehetővé teszi a sterilizációs ciklusok tárolását USB pendrive-ra.



Vonalkódyomtató
A vonalkódos címkék kinyomtatásához össze kell kötni a Multiportot a LisaSafe címkenyomtatóval.

Visszakövethetőség



Visszakövethetőség gombnyomásra

Visszakövethető, hiánytalan, biztonságos. A visszakövethetőségi koncepció biztosítja Önnek az összekötő elemet a sterilizálási ciklus és a páciens kartonja között. Ezáltal garantálható a higiéniai protokoll hiánytalan betartása.



Kockázatmentes ciklusválasztás
Az egyszerű menüfelépítés lehetővé teszi az automatikus sterilizálási ciklusok biztonságos kiválasztását.



Biztonságos ciklusok
A folyamatértékelő rendszer figyeli az összes aktuális ciklusparamétert, és garantálja a sikeres sterilizálási eredményt.



Rakomány ellenőrzése/jóváhagyása
A steril rakomány ellenőrzésre és jóváhagyásra kerül. A ciklusprotokoll automatikusan mentésre kerül a memóriakártyára.



Egyszerű felcímkézés
A kinyomtatott vonalkódos címkéket a sterilizált eszközök csomagolására lehet ragasztani.



Tárolás
A becsomagolt eszközök felhasználásánál a First In – First Out (FIFO) alapelvet kell alkalmazni. Az eszközöket a lejáratú dátum előtt kell felhasználni.



Adatátvitel
Az információk bevihetők vonalkóddolvasóval a páciens adatfájljába, vagy a címke felragasztható a páciens kartonjára.

LisaSafe, Print, Sprint, LisaWare



Lisa és Lina tartozékok

Kompakt, praktikus, jó. A W&H számos tartozékot kínál a sterilizálási eljárás optimalizálásához. A kis extrák nagy eredményekhez vezetnek. A fogászati praxis működése egyszerűbbé válik, az Ön csapatának pedig több ideje marad.



LisaSafe vonalkódnymató
A vonalkódnymató segítségével egyszerűen és kényelmesen létrehozható a kapcsolat a sterilizálási ciklus és a páciens kártya között.



Vonalkódozó
A LisaSafe csomag vonalkódozó is tartalmaz, amelynek segítségével beszkenelheti a vonalkódokat a páciens adatfájljába.



LisaWare szoftver
A ciklusprotokoll automatikus számítógépre mentéséhez közvetlenül soros csatlakozón vagy helyi hálózaton keresztül.



Print: Lisa
Mátrixnyomató a sterilizálási ciklusok szabványos papírtekercsre történő kinyomtatásához.



Sprint: Lina
A ciklusprotokollok kinyomtatásához hőpapírra, a papírra vonatkozó, 10 éves garanciával.




Helix-teszt
A Helix-teszt egy vizsgálati indikátor rendszer, amely kizárólag B osztályú sterilizátorokhoz alkalmas.

Seal²



Tökéletes fóliahegesztési eljárás

Expressz csomagolás a Seal² segítségével. Nehéz megőrizni egy termék sterilitását. Ez csak úgy érhető el, ha tökéletesen hermetikus és ellenálló védelem áll rendelkezésre a sterilizált elem számára a környezeti hatásokkal szemben.

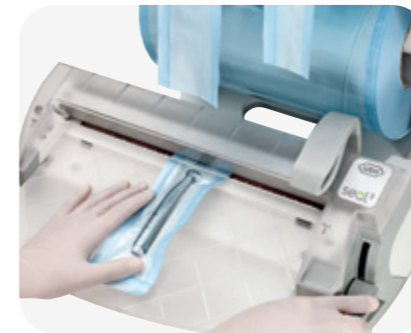

Seal²

A fólialezáró készülék mindössze 2 másodperc alatt 12 mm széles szigetelő varratot hoz létre.




Hermetikus szigetelés

Az elektronikusan szabályozott lezárási hőmérséklet garantálja a tökéletesen hermetikus szigetelést.



Szabadalmaztatott dupla tekerstartó

A szabadalmaztatott dupla tekerstartó sokféle tekercszélességet lehetővé tesz.

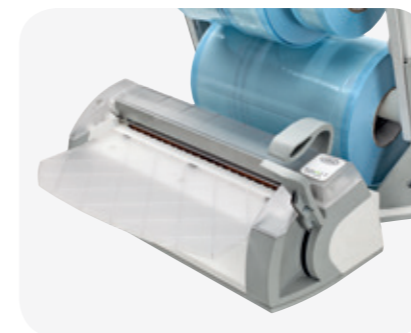

Komfort és felhasználóbarát kialakítás

Az optimális kezelésről az átlátszó hegesztőkészülék és az integrált munkafelület gondoskodik.



Rugalmas munkavégzés

A tekerstartó levehető az állomásról, és felszerelhető a falra, ami lehetővé teszi a rugalmas munkavégzést szűk helyen is.

Multidem



Vízelőkészítő rendszerek

Tökéletesen tiszta víz az összes rendszer számára. A Multidem ioncserélt vizet biztosít a gőzgenerátor számára, és számos hagyományos sterilizátorhoz és előkészítő berendezéshez használható.



Felhasználóbarát

A patroncsere gyorsan és szerszám nélkül elvégezhető. A patron rögzítés nélkül behelyezhető.



Kompatibilis

A Multidem alkalmazható hagyományos sterilizátorokhoz és előkészítő berendezésekhez.



Praktikus

A Multidem rendelkezik egy kiegészítő szórópisztollyal, és tökéletesen alkalmas az eszközök sterilizálás előtti leöblítésére.



Takarékos

A Multidem használatához nincs szükség elektromos csatlakozásra. Optimalizált ioncserélő gyantával rendelkezik.



Biztonságos

A tisztított víz megfelel a gőzsterilizátorok üzemeltetésére és az eszközök előkészítésére vonatkozó ajánlásoknak és előírásoknak.

Osmo, Dist, Prim



Vízelőkészítő rendszerek

Kiváló minőségű, ioncserélt víz. A kiváló minőségű, ioncserélt víz garantálja az egyenletes, optimális teljesítményt, és meghosszabbítja a sterilizátor és az eszközök élettartamát.



Osmo

Az Osmo képes több sterilizátor automatikus feltöltésére és ürítésére egyidejűleg.



Szórópisztoly

Az Osmo rendelkezik szórópisztollyal egyéb berendezések manuális feltöltésére vagy az eszközök sterilizálás előtti leöblítésére.



Tartály

A víztartály űrtartalma 9 liter.



Dist

A LisaDist kevesebb, mint 5 óra alatt 4 liter kiváló minőségű desztillált vizet termel.



Prim

A LisaPrim a víz vezetőképességének mérésével ellenőrzi a vízminőséget.

W&H adapterkészlet tisztító és fertőtlenítő készülékekhez

Kompakt, praktikus, univerzális. A W&H adapterkészlet lehetővé teszi a tartozékok és kisebb alkatrészek komplikációk nélküli, hitelesített, gépi előkészítését thermodezinfektorban – belül és kívül.



W&H adapterkészlet

A W&H adapterkészletet speciálisan tartozékok és kisebb alkatrészek gépi előkészítéséhez fejlesztették ki.




Hitelesített tisztítás

Támogatja a belvilággal rendelkező eszközök, például depurátorhegyek vagy hűtőcsövek belső tisztítását és fertőtlenítését.



Csavarmenetek belső és külső tisztítását


Az adapterfej speciális kialakítása biztosítja a belső és külső csavarmenetek tisztítását.

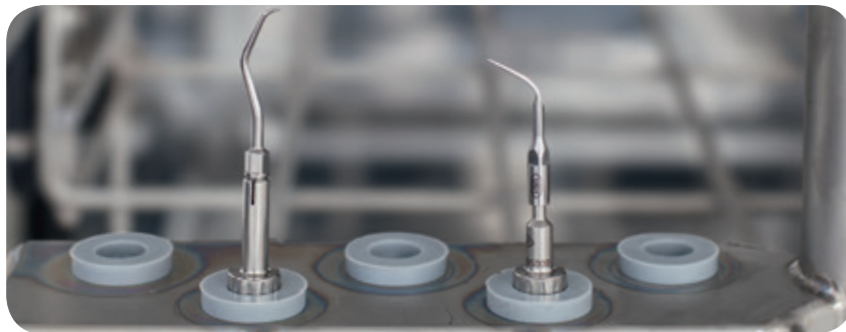

Univerzálisan alkalmazható

Alkalmas az összes 8 mm-es (M8x1) belső menettel rendelkező RDG öblítőcsőhöz vagy ahhoz illeszkedő gumibetéthez.

A W&H adapterkészlet kompatibilis az összes M3x0,5 mm menetű hegygel. A részletes listát a wh.com oldalon találhatja meg.

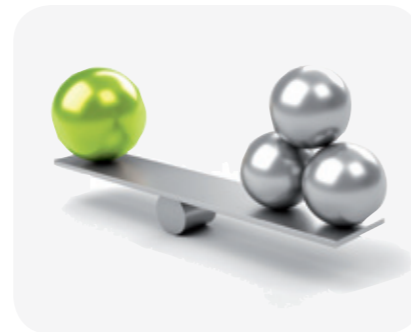

Ár/teljesítmény arány

A legmagasabb tisztítási és fertőtlenítési hatékonyság alacsony beszerzési költségek mellett.

Assistina 3x3 / 3x2

CE

Típus:	3x3	3x2
Eljárás:	Belső tisztítás, külső tisztítás, olajozás	Belső tisztítás, olajozás
Alkalmas a következőkhöz:	Kézi- és könyökdarabok, turbinák, légmotorok és levegős fogköeltávolító eszközök	
Hálózati feszültség:	100 – 240 V	
Max. teljesítményfelvétel:	40 VA	
Levegőigény:	kb. 100 nl/perc	kb. 60 nl/perc
Üzemi nyomás:	5 – 10 bar (a beépített, automatikus nyomásszabályozó szabályozza)	
Magasság / szélesség / mélység:	358 x 207 x 397 mm	
Feltöltési mennyiség:	1.000 ml W&H Activefluid, MC-1100, 200 ml W&H Service Oil F1, MD-200	

A különböző Assistina 3x3 / 3x2 adapterekre vonatkozó, részletes adatokat a wh.com oldalon találhatja meg.



W&H Activefluid

Tisztító oldat az eszközök alapos belső és külső tisztításához az Assistina 3x3/3x2 használata esetén.

W&H Service Oil F1

A hajtómű alkatrészeinek optimális olajozása növeli a precíziós fogászati eszközök élettartamát.

Assistina 301 plus

CE

Típus:	Assistina 301 plus
Ciklusidő:	kb. 35 perc
Service Oil feltöltési mennyiség:	250 ml, kb. 3.500 ápolási ciklushoz
Tisztító oldat feltöltési mennyiség:	250 ml, kb. 2.500 ápolási ciklushoz
Csatlakozás:	gyorskuplungos sűrített levegő-csatlakozás Ø 6 x 4 mm-es levegőtömlőhöz, a beépítési oldalon R 1/8" belső menettel
Üzemi nyomás:	4 - 10 bar alakító nyomás (automatikus nyomásszabályozás)
Levegőigény:	kb. 60 liter/perc
Magasság / szélesség / mélység:	223 x 190 x 415 mm
Tömeg:	2,70 kg

Lisa



Típus:	Lisa
Áramellátás:	200 – 240 Vac 50 / 60 Hz; 10 A
Energiafogyasztás:	2,0 – 2,4 kW
Külső méretek (Szé x Ma x Mé)	450 x 435 x 599 mm
Tömeg:	Lisa 517: 43,9 kg Lisa 522: 46,2 kg
Átlagos zajszint (L _{WA})	62 dB
Tisztavíz-/szennyvíztartály:	4 / 3,5 liter
Munkatartomány:	7 – 11 ciklus
A kamra hasznos térfogata (Szé x Ma x Mé)	17l: 195 x 205 x 300 mm 22l: 195 x 205 x 385 mm
Csatlakoztatási lehetőségek:	1 párhuzamos csatlakozó, 2 soros csatlakozó, integrált szelep az automatikus vízbevezetéshez, valamint Ethernet/LAN (opció)

Lina



Típus:	Lina
Áramellátás:	220 – 240 Vac 50 / 60 Hz; 8,75 A
Energiafogyasztás:	1,75 kW
Külső méretek (Szé x Ma x Mé):	450 x 435 x 599 mm
Tömeg:	Lina MB17: 38 kg Lina MB22: 40,5 kg
Átlagos zajszint (L _{WA}):	63 dB
Tisztavíz-/szennyvíztartály	4 / 3,5 liter
Munkatartomány:	4 – 7 ciklus
A kamra hasznos térfogata (Szé x Ma x Mé):	17l: 195 x 195 x 297 mm 22l: 195 x 195 x 390 mm
Csatlakoztatási lehetőségek:	1 soros csatlakozó, USB és 2 soros csatlakozó (opcionálisan Multiporttal), valamint integrált szelep az automatikus vízbevezetéshez (opció)

Multidem

Típus:	Multidem C17	Multidem C27
Üzemi nyomás:	2 bar - 8.6 bar (max.)	
Bemeneti vízhőmérséklet:	4 – 30 °C / 40 – 86 °F	
Névleges térfogatáram:	60 l/h	
Kimenő vízminőség:	ioncserélt (EN 13060)	
Bemenő vízminőség:	ivóvíz	
Tömeg:	1,7 kg	2,7 kg
Szélesség / mélység / magasság:	117 / 108 / 421 mm	124 / 123 / 476 mm
Beépítési helyzet:	függőleges	
Tömlőhosszúságok:	2 x 3 m	
Biztonsági szelep:	Igen	
Visszafolyásgátló:		

Osmo


Típus:	Osmo
Méretek (Szé x Mé x Ma) mm:	520 x 200 x 420
Tömeg:	11,0 kg
H ₂ O - nyomás:	1 ± -5 bar

Seal²


Típus:	Seal ²
Hálózati feszültség:	200 – 240 V / 100 W
Méretek (Szé x Mé x Ma) mm:	452 x 480 x min 315 – max 420
Tömeg:	7,1 kg

Adapter rendszeráttekintés – Assistina 3x3 / 3x2

Kézi- és könyökdarabok

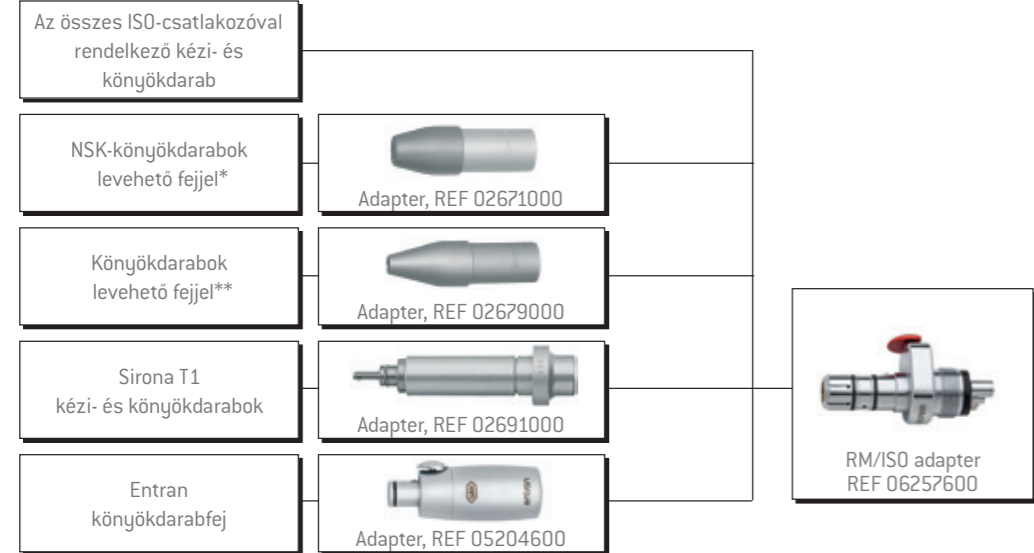

Turbinák

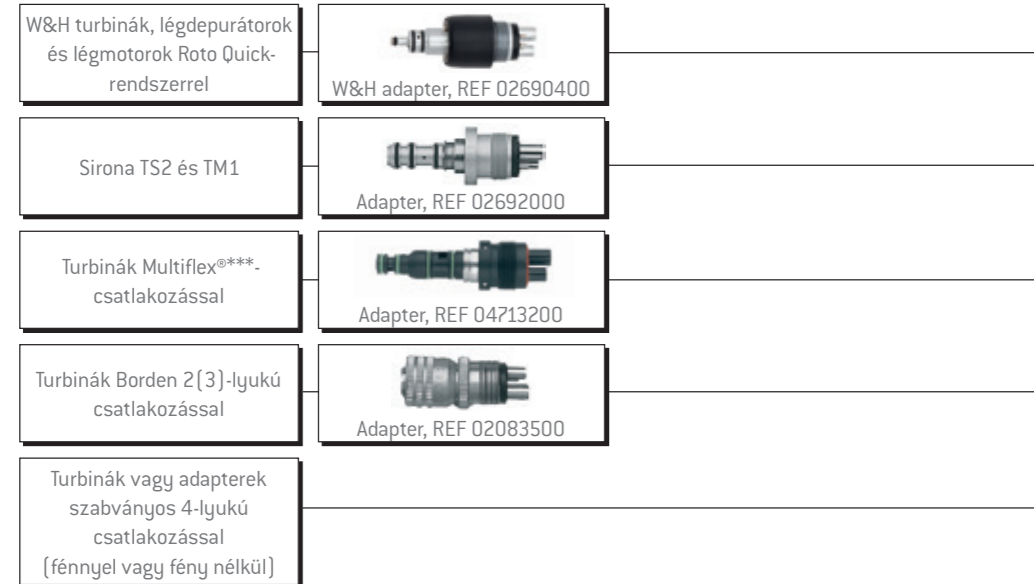

*) kizárólag a következő típusokhoz:

Phatelus fejek
ARS-PTL NFB-PTL
EVA-PTL NM-PTL
TE-PTL NPB-PTL
VM-PTL NRS-PTL

**) kizárólag a következő típusokhoz:

LN/CN fejek
3 LD 22 LB 53 LS 61 LF 67 LDN
3 LDSY 31 LR 61 LA 61 LR 68 LDN
4 L 52 LDN 61 LB 62 LDN 80 LD
22 LA 53 LDN 61 LC 66 LD


A fejek
52 3 LDSY 53 GDN 6 GD
79 4 G 61 G 67 CN
80 31 GR 62 GDN 68 CDN
3 D 53 G 62 GN 68 CN

Sebészi fejek
67 H
67 IC


***) A Multiflex® a németországi Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG bejegyzett védjegye

Adapter rendszeráttekintés – Assistina 301 plus

Kézi- és könyökdarabok

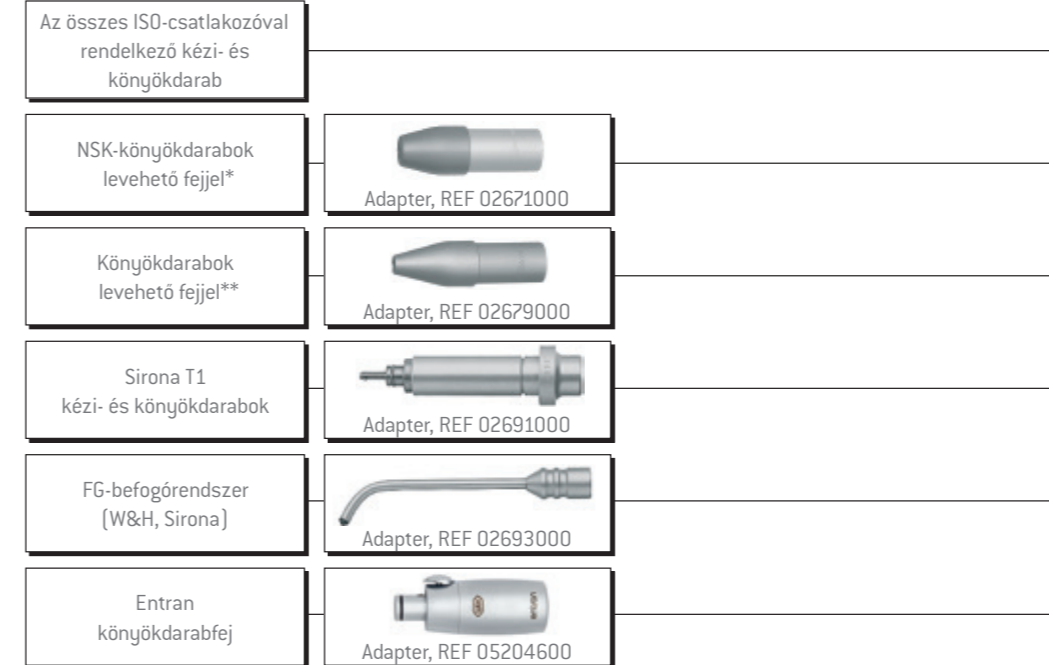

Turbinák

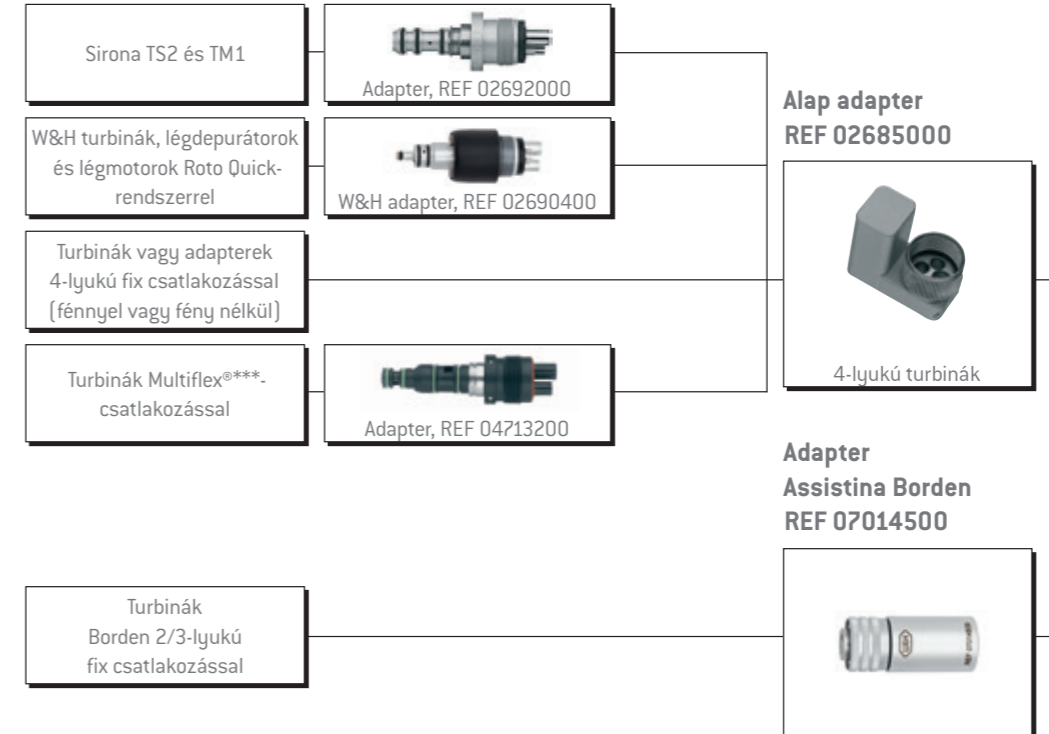

*) kizárólag a következő típusokhoz:

Phatelus fejek
ARS-PTL NFB-PTL
EVA-PTL NM-PTL
TE-PTL NPB-PTL
VM-PTL NRS-PTL

**) kizárólag a következő típusokhoz:

LN/CN fejek
3 LD 22 LB 53 LS 61 LF 67 LDN
3 LDSY 31 LR 61 LA 61 LR 68 LDN
4 L 52 LDN 61 LB 62 LDN 80 LD
22 LA 53 LDN 61 LC 66 LD

A fejek
52 3 LDSY 53 GDN 6 GD
79 4 G 61 G 67 CN
80 31 GR 62 GDN 68 CDN
3 D 53 G 62 GN 68 CN

Sebészi fejek
67 H
67 IC

***) A Multiflex® a németországi Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG bejegyzett védjegye

Sterilizálás, higiénia és ápolás

Szimbólumfotók ábrája. A szállítási terjedelem nem tartalmazza a kiegészítő tárgyakat és a bemutatott tartozékokat.

Olvassa be mobiltelefonja segítségével a QR-kódot, és tudjon meg többet termékeinkről



W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t + 39 035-66 63 000
f + 39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com